


dexcomG6

ابدأ من هنا الضبط

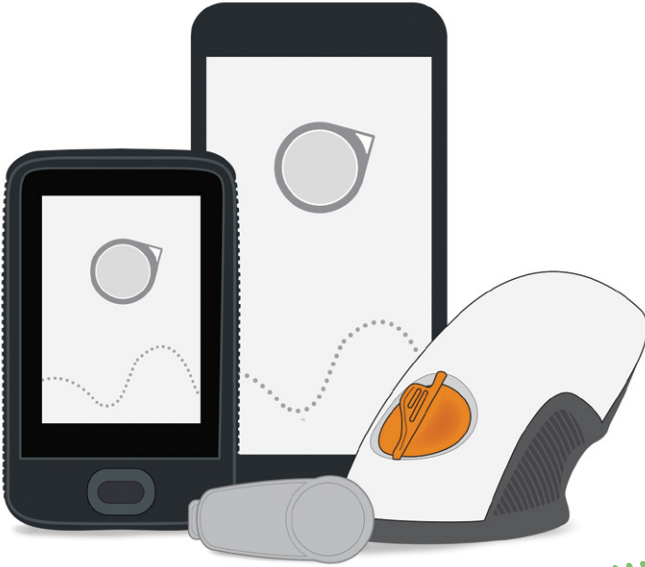

تعليمات الاستخدام

نظرة عامة على جهاز Dexcom G6 لمراقبة الغلوكوز المستمرة

جهاز العرض

جهاز استقبال
Dexcom




جهازك الذكي




- يعرض معلومات الغلوكوز
- اضبط جهازك الذكي، جهاز استقبال Dexcom، أو كلاهما
- للحصول على قائمة بالأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل المتوافقة انتقل إلى: dexcom.com/compatibility
- تطبيق G6 وجهاز الاستقبال متوافقان مع كافة أنظمة G6

أداة الإدخال المزودة بمستشعر مدمج

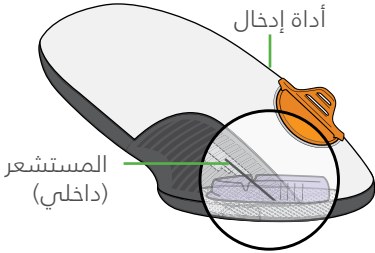

- تُدخل أداة إدخال المستشعر تحت الجلد
- يكتشف المستشعر معلومات الغلوكوز

جهاز الإرسال

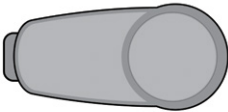


- يُرسل معلومات الغلوكوز من المستشعر إلى شاشة العرض

جميع الصور تمثيلية. وقد يبدو المنتج الخاص بك مختلفًا.

راجع بيان السلامة في القسم 2 من دليل استخدام جهاز G6 قبل استخدام جهاز G6 الخاص بك.

ماذا يفعل؟

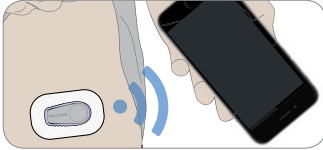


يقوم جهاز G6 بإرسال قراءات الغلوكوز بالمستشعر (قراءات G6) إلى جهازك الذكي.

اختر التطبيق، جهاز الاستقبال أو كلاهما



جهازك الذكي

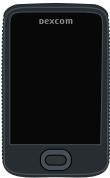

جهاز استقبال
Dexcom


يعد جهاز الاستقبال جهازًا طبيًا مخصصًا. ولكن جهازك الذكي لا يعد جهازًا طبيًا حتى إذا كنت تُشغل عليه تطبيق G6. لا يعد جهازك الذكي جهازًا طبيًا وذلك لاحتمالية عدم استقبال التطبيق لإنذار/تنبيه بسبب وجوده على جهاز ذكي - على سبيل المثال، بسبب إعدادات الجهاز الذكي، أو إيقاف تشغيل الجهاز الذكي أو التطبيق، أو انخفاض طاقة البطارية، وغيرها من الأسباب.

استخدم التبويبات لضبط التطبيق، وجهاز الاستقبال أو كلاهما


هل ترغب في ضبطهما معًا؟ اختر أحدهما لضبطه أولًا وانتقل إلى هذا التبويب. تُظهر الخطوة الأخيرة كيف تضبط جهاز العرض الثاني. لا تستخدم التبويين.

للتعرف على طرق أخرى لكيفية ضبط جهاز G6:


- شاهد البرنامج التعليمي من خلال هذا الرابط: dexcom.com/downloadsandguides
- اتصل بممثل Dexcom المحلي الخاص بك للمساعدة

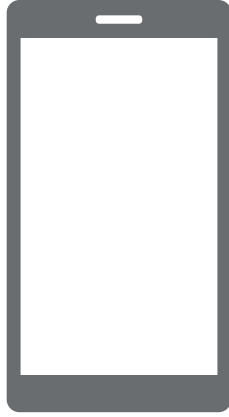

جهازك الذكي

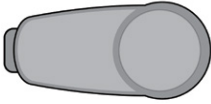

جهاز الإرسال

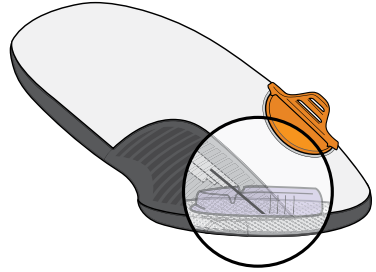

أداة الإدخال المزودة
بمستشعر مدمج

الخطوة 1: ضبط التطبيق

أ
نزل تطبيق Dexcom G6 وافتحه




ب اتبع تعليمات الضبط الظاهرة على الشاشة



1 عندما يُطلب منك:

- أرسل بياناتك إلى التخزين السحابي. وذلك يسمح لك باستخدام: Share: أرسل بيانات G6 إلى المتابعين.
- CLARITY: يشارك البيانات مع الأطباء؛ يعرض أنماط الغلوكوز الخاصة بك (قد لا يكون متوفرًا في جميع المناطق).
- أدخل رمز المستشعر (من أداة إدخال المستشعر الذي ستدخله).
- لا يوجد رمز مستشعر؟ راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك، والملحق A استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

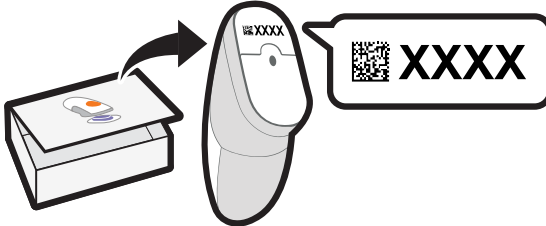

- أدخل الرقم التسلسلي (SN) من:

العودة إلى جهاز الإرسال



أو

صندوق جهاز الإرسال



بعد إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك، سيبحث جهاز G6 عن جهاز الإرسال. أثناء البحث، لن تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات G6.

2



هل ترى مؤقت التشغيل السريع للمستشعر باللون الأزرق؟ فذلك يعني أن المستشعر يقرأ بيانات جسمك.

أثناء الضبط على الأحماء:


- لا تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات G6
- أبق الجهاز الذكي ضمن 6 أمتار من جهاز الإرسال

ج انتظر لمدة ساعتين

- عند اكتمال مرحلة إحماء المستشعر، انقر فوق موافق لرؤية الشاشة الرئيسية
- الآن يمكنك الحصول على قراءات G6 والإنذارات/التنبيهات



الخطوة 2: راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك

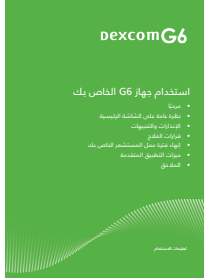

تعلم كيفية:


- قراءة شاشتك الرئيسية
- استخدم الإنذارات والتنبيهات
- اتخاذ قرارات العلاج
- اكتشاف المشكلات وإصلاحها

الخطوة 3: اختياري - ضبط جهاز الاستقبال




شغل جهاز الاستقبال بالضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ. ثم اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.


لا تستخدم تبويب ضبط جهاز الاستقبال. فهذه الخطوات لضبط جهاز الاستقبال قبل ضبط التطبيق.

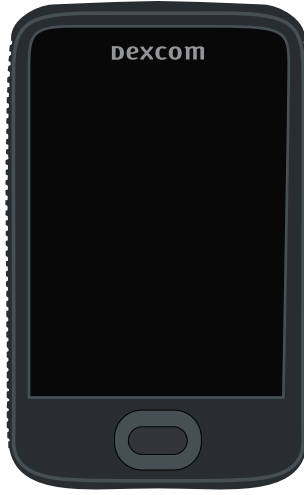

جهاز الاستقبال

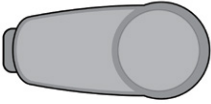


جهاز الإرسال

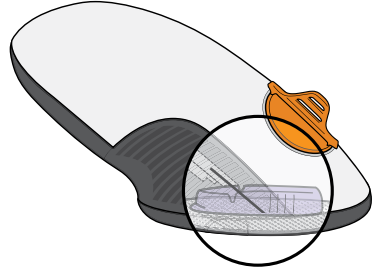


أداة الإدخال المزودة
بمستشعر مدمج

ضبط جهاز الاستقبال

الخطوة 1: ضبط جهاز الاستقبال

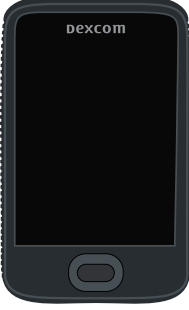

أ أخرج جهاز الاستقبال من الصندوق

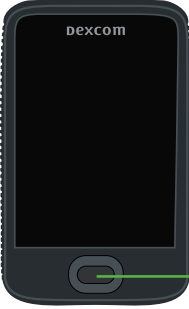


ب شغل جهاز الاستقبال

اضغظ على زر الطاقة لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ.

ج اتبع التعليمات الواردة على الشاشة

1 عندما يطلب منك:

- أدخل رمز المستشعر من أداة إدخال المستشعر الذي ستدخله
 - لا يوجد رمز مستشعر
- راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك، الملحق A استكشاف الأخطاء وإصلاحها

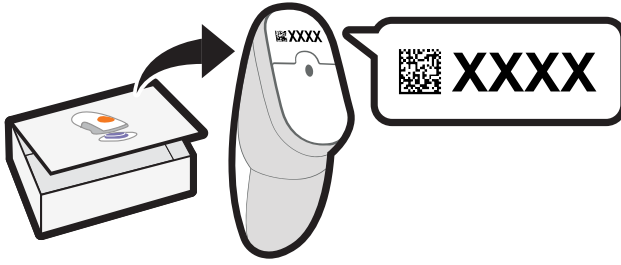

• الرقم التسلسلي (SN) من:

العودة إلى جهاز الإرسال




أو

صندوق جهاز الإرسال




بعد إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك، سيبحث جهاز G6 عن جهاز الإرسال. أثناء البحث، لن تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات G6.

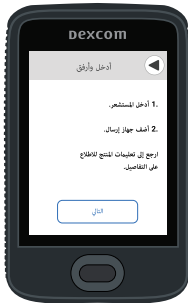

2 تنتهي من هذه الخطوة عندما ترى هذه الشاشة:

الخطوة 2: استخدم أداة الإدخال لإدخال المستشعر المدمج

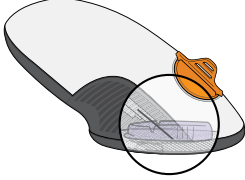

أ أخرج أداة الإدخال المزودة
بمستشعر مدمج من
صندوق المستشعر



اجمع المواد: أداة الإدخال (بالرمز الذي
أدخلته للتو)، جهاز الإرسال، وماسحة.

ب حدد مكان إدخال المستشعر

عامة إلى 17 عامًا فقط

أو


عامة أو أكبر

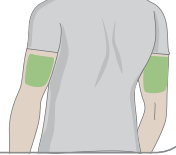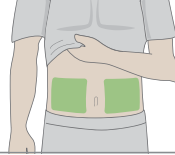


تجنب أماكن العظام، أو الجلد الملتهب، وأماكن الوشم، والأماكن التي
تصاب بالتورم.

ج استخدم أداة الإدخال لإدخال المستشعر المدمج


2 اغسل يديك وجففها.

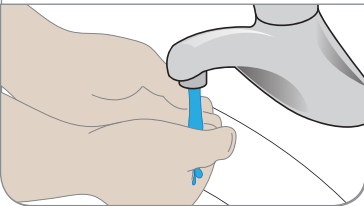


1 احصل على أداة إدخال
المستشعر ومسحات كحول.

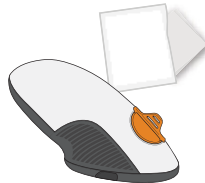


4 أزل طبقة الحماية اللاصقة.
لا تلمس المادة اللاصقة.

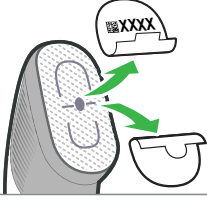


3 نظف مكان إدخال المستشعر
باستخدام مسحات كحول.

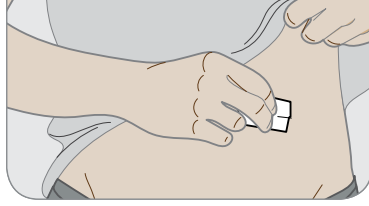


6 اثنِ واقِي الأمان واقطعه.

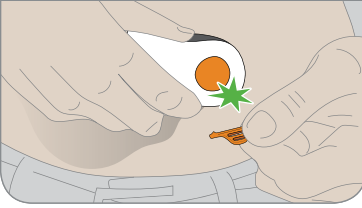

5 ضع أداة الإدخال على الجلد.

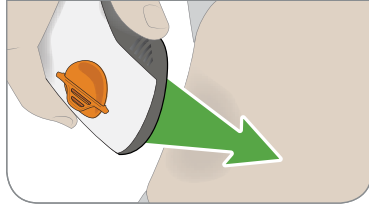


8 أزل أداة الإدخال من الجلد
تاركًا الضمادة والحامل.

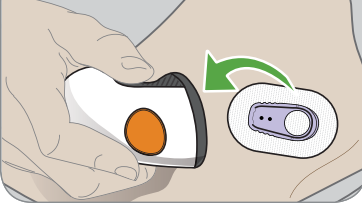

7 اضغط على الزر لإدخال
المستشعر.





9 تخلص من أداة الإدخال. اتبع
التعليمات المحلية فيما يتعلق
بالمكونات التي تلامس الدم.

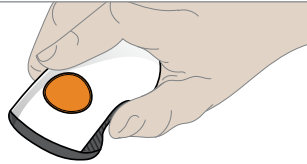


الخطوة 3: أضف جهاز الإرسال

أ أخرج جهاز الإرسال من الصندوق

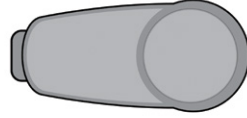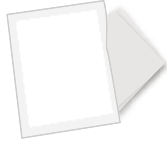


ب ثبت جهاز الإرسال


2 أدخل جهاز الإرسال،
اللسان أولاً في الحامل.

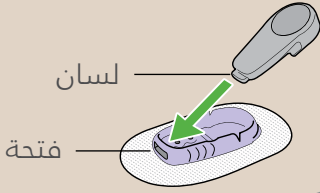


1 امسح جهاز الإرسال
بممسحات كحول.

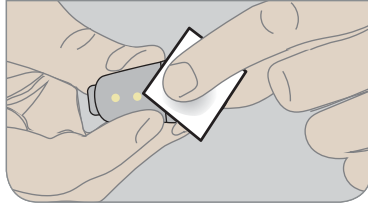

4 لف ضمادة حوله 3 لفات.

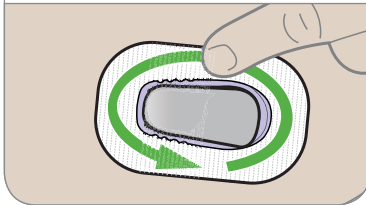

3 ثبت جهاز الإرسال. تسمع
صوت نقر عند ثباته في
مكانه. تأكد من أنه مستوٍ
وثابت على الحامل.

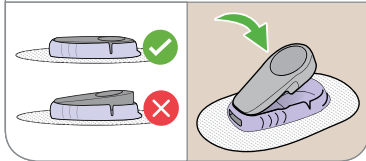

الخطوة 4: ابدأ تشغيل المستشعر في جهاز الاستقبال

أ

انتظر مدة 30 دقيقة لحدوث الاقتران

أثناء عملية الاقتران:

- لا تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات G6
- أبق جهاز الاستقبال ضمن 6 أمتار من جهاز الإرسال



ب انقر فوق بدء تشغيل المستشعر لتبدأ عملية الإحماء
لمدة ساعتين

أثناء فترة الاستعداد، لن
تحصل على قراءات أو
إنذارات/تنبيهات G6



ج

انتظر


- عند اكتمال عملية الاستعداد، انقر فوق
التالي للانتقال إلى الشاشة الرئيسية
- الآن يمكنك الحصول على قراءات G6
والإنذارات/التنبيهات



الخطوة 5: راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك

تعلم كيفية:

- قراءة شاشتك الرئيسية
- استخدام الإنذارات والتنبيهات
- اتخاذ قرارات العلاج
- اكتشاف المشكلات وإصلاحها

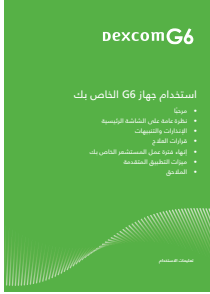

الخطوة 6: اختياري - ضبط التطبيق



نزل التطبيق على جهازك الذكي وافتحه. ثم اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.

لا تستخدم تبويب ضبط التطبيق. فهذه الخطوات لضبط التطبيق قبل ضبط جهاز الاستقبال.



حقوق الطبع لسنة 2019 محفوظة لصالح شركة Dexcom.

محمية بموجب براءات الاختراع dexcom.com/patents.

Shareg , Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom Clarity هي علامات تجارية مسجلة لصالح Dexcom, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وربما بعض الدول الأخرى.

Dexcom



شركة Dexcom
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
dexcom.com

خارج الولايات المتحدة: اتصل بممثل
Dexcom المحلي الخاص بك



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

