

G7dexcom

חדש בישראל!



זמן חימום
חצי שעה



קטן יותר
מדקסיום G6



GRACE PERIOD
של 12 שעות לסנסור
בתום 10 ימי עבודה



רמת דיוק
גבוהה
(MARD 8.2%)



התרעות חכמות
ומותאמות אישית



משדר וסנסור
ביחידה אחת




שירות לקוחות: 03-5773800
www.dexcomisrael.co.il

 **Padagis™**



הסנסור הקטן
ALL IN ONE
נבר כאן!



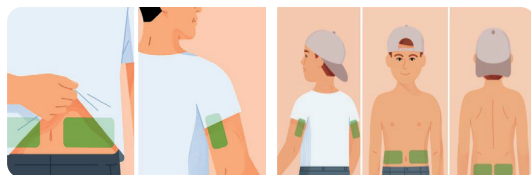

גיל 7 ומעלה: זרוע עליונה ובטן

גיל 6-2: זרוע עליונה, בטן ובחלק העליון של הישבן

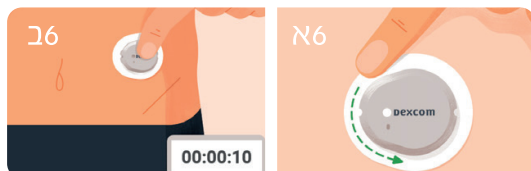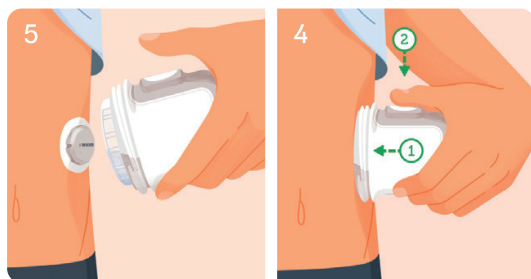

1 בחר מיקום החיישן בהתאם לגיל (התייעץ עם הצוות הרפואי)

יש להמנע מאזורים:

- בהם העור רפוי או ללא שומן כדי להמנע משרירים ועצמות
- חשופים למכות או שישנים עליהם
- לפחות 8 ס"מ מסט העירוי
- ליד החגורה, קעקועים, עור פצוע, צלקות ואזורים עם הרבה שיער

2 שמור על האיזור נקי ויבש

- א. שטוף ויבש את הידיים
- ב. נקה את אזור ההחדרה במגבון אלכוהול והמתן עד לייבוש (לא מנקים עד שהאזור יבש)

3 הסר את המכסה של המחדיר

פתח בסיבוב את המכסה, אל תיגע בתוך המחדיר, כחן את המחדיר וודא שהוא תקין. אל תשתמש אם הוא פגום או נפתח בעבר

4 השתמש במחדיר להכנסת הסנסור

הרפה את השרירים באיזור, לחץ והחזק את המחדיר בחוזקה כנגד העור עד שלא תראה את השכבה השקופה. לחץ על כפתור המחדיר

5 הסר את מכסה המחדיר

- שמור את ההתקן להחדרה מכיוון שתצטרך אותו לקוד הצימוד
- הברג חזרה את מכסה המחדיר

6 הצמדת הסנסור לעור

- כדי לסייע לשמור את המדבקה על העור שלך:
- א. עסה בעדינות 3 פעמים את מדבקת הסנסור
 - ב. לחץ בעדינות על הסנסור למשך 10 שניות

7 מדבקת חיזוק

- מיועדת להצמדת החיישן על העור שלך
- ארוזה עם הוראות השימוש באריזת החיישן
- א. מישכו בזהירות את הציפויים השקופים בזה אחר זה. אין לגעת באזור של הדבק הלבן
- ב. השתמשו בלשונית הצבעונית כדי למקם את המדבקה העליונה סביב החיישן
- ג. עסו בתנועות סיבוביות מדבקה עליונה
- ד. השתמשו בלשונית לקילוף הכיסוי הצבעוני
- ה. עסו בתנועות סיבוביות מדבקה עליונה

טיפול במדבקת הסנסור

- ככל שתשמור על מדבקת הסנסור יבשה וללא זיעה במהלך 12 השעות הראשונות, כך היא תישאר צמודה לעורך למשך זמן רב יותר
- כאשר היא נרטבת, טפח עליה בעדינות כדי ליבשה בהקדם האפשרי
- אם היא מתקלפת מעורך, גזור את הקצוות שהתקלפו והנח מדבקת חיזוק חדשה או השתמש באביזר הדבקה אחר