


DexcomG7

הגדרת מקלט



כיצד ה-Dexcom G7 פועל?

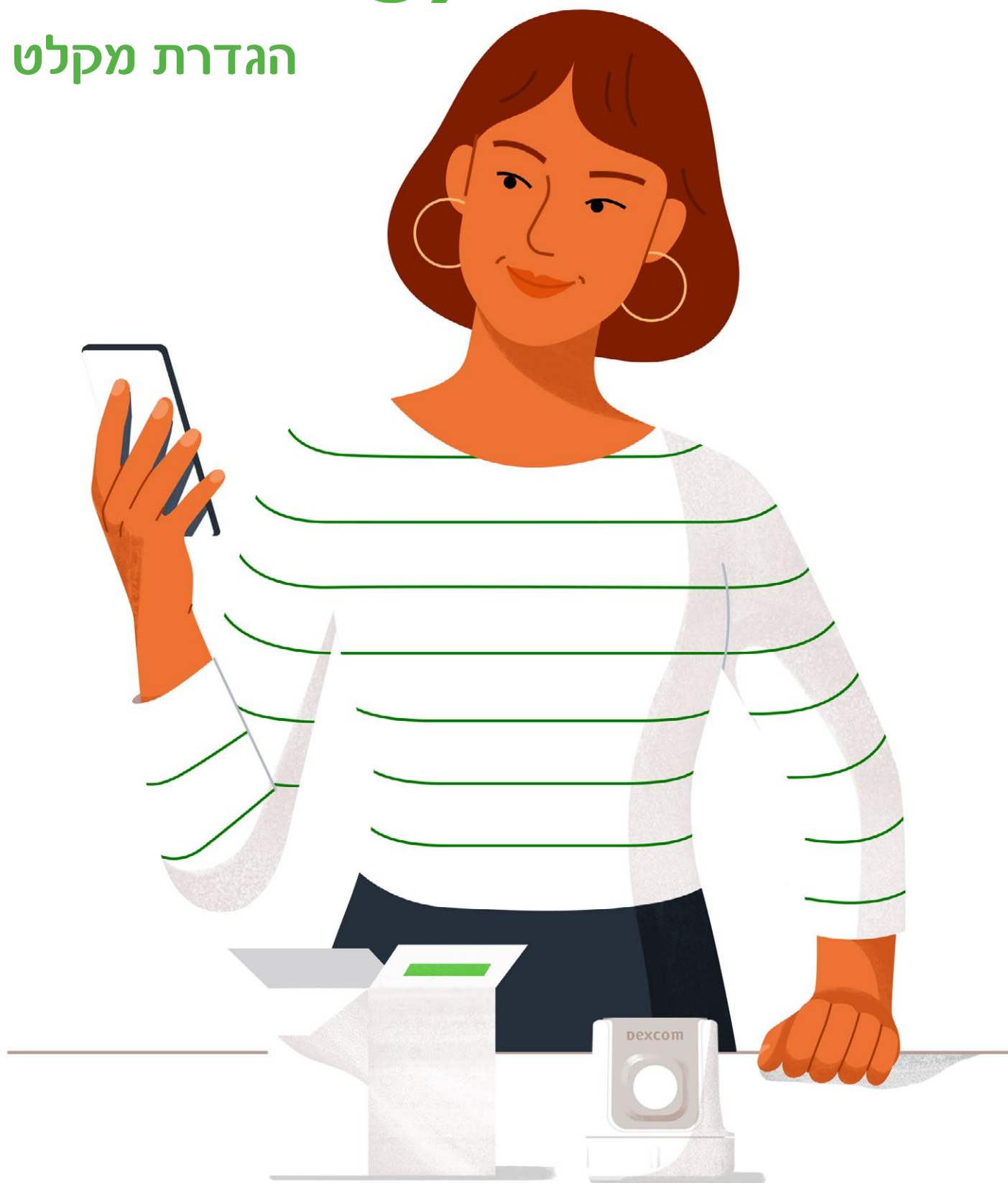


מקלט Dexcom G7

- מציג את קריאת רמות הסוכר כל 5 דקות.

מחדיר משולב עם חיישן

- המוליך מחדיר את החיישן מתחת לעור.
- החיישן מקבל מידע על רמות הסוכר שלך.
- החיישן עובד במשך 10 ימים בתוספת של 12 שעות (Grace Period).
- החיישן שולח את המידע מהחיישן למקלט.

דיוק

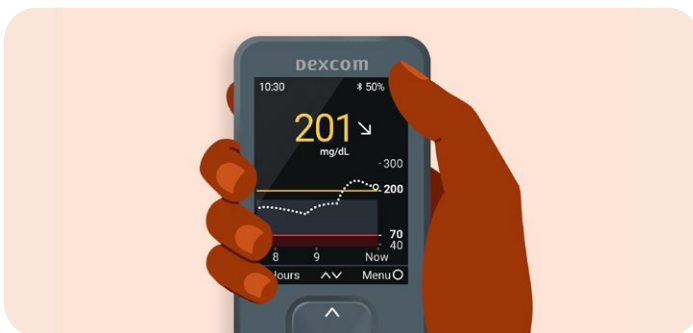

יתכן שהקריאות של Dexcom G7 ומד הסוכר לא יהיו זהות וזה בסדר. ה-Dexcom G7 מודד את רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי ומד הסוכר מודד את רמות הסוכר בדם. הקריאות יכולות להיות שונות ועדיין להיחשב מדויקות.

ניווט במקלט

כדי לגלול מהר יותר, יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן הגלילה. כדי לעבור למסך הבא, יש להשתמש בלחצן הבחירה.

גלול מעלה

חזרה



בחירה

גלול מטה

שלב 1: הגדרת המקלט



כדי להדליק את המקלט יש ללחוץ על לחצן **הבחירה** למשך 3-5 שניות. לחץ **הבא** במסך הפתיחה.

בחירה




הגדרת תאריך ושעה.



מומלץ לבחור בתצוגת זמן של 24 שעות



אשר את תנאי השימוש.

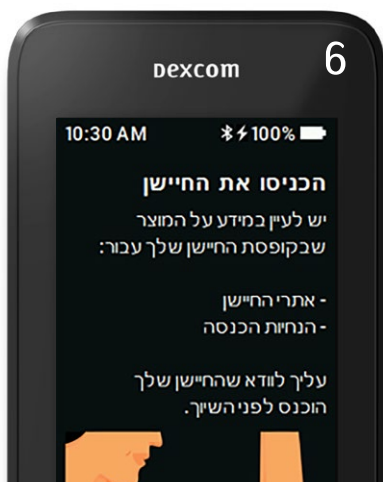

החדר את החיישן.



ראה הדרכה קצרה בנושא בטיחות, החלטות טיפול, חיצו מגמה, קריאת מסך הבית שלך והתראות.




שלב 2: הכנסת החיישן

גיל 7 שנים ומעלה: אזורי ההחדרה בבטן או בגב הזרוע העליונה
גיל 2-6 שנים: אזורי ההחדרה בבטן, בחלק העליון של הישבן או בגב הזרוע העליונה
לפני שתתחיל, שטוף וייבש את הידיים; לאחר מכן נקה את אזור ההחדרה באלכוהול.



הסר את המחדיר.

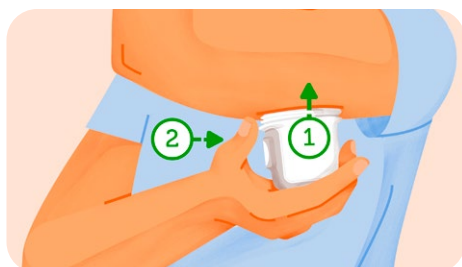


הצמד את המחדיר בחוזקה אל העור ולחץ על הכפתור.



פתח את הכיסוי של המחדיר אין לגעת בתוך המחדיר.



לחץ בעדינות על החיישן למשך 10 שניות.

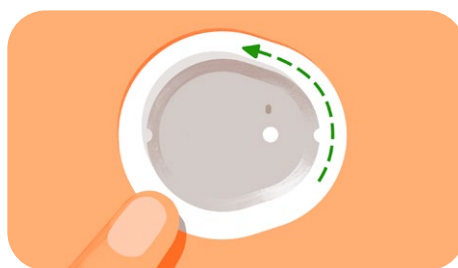

עסה בתנועות סיבוביות את שולי המדבקה 3 פעמים.


שלב 3: מדבקת חיזוק (ניתן להשתמש במידת הצורך)




עסה בתנועות סיבוביות את המדבקה.



השתמשו בלשונית הצבעונית כדי למקם את המדבקה סביב החיישן.

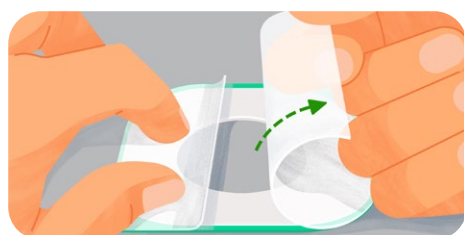


משוך בזהירות את הציפויים השקופים בזה אחר זה. הקפד לא לגעת באזור של הדבק הלבן.

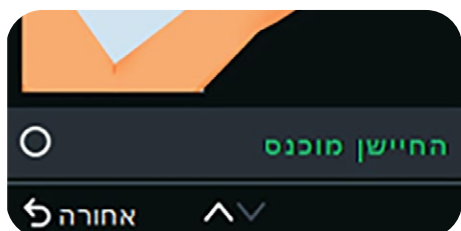

במקלט, יש לאשר שהחיישן הוחדר.




עסה בתנועות סיבוביות את המדבקה.

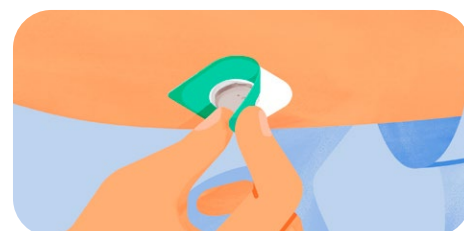

הסר את הכיסוי הצבעוני.

שלב 4: צמד והתחל חימום חיישן

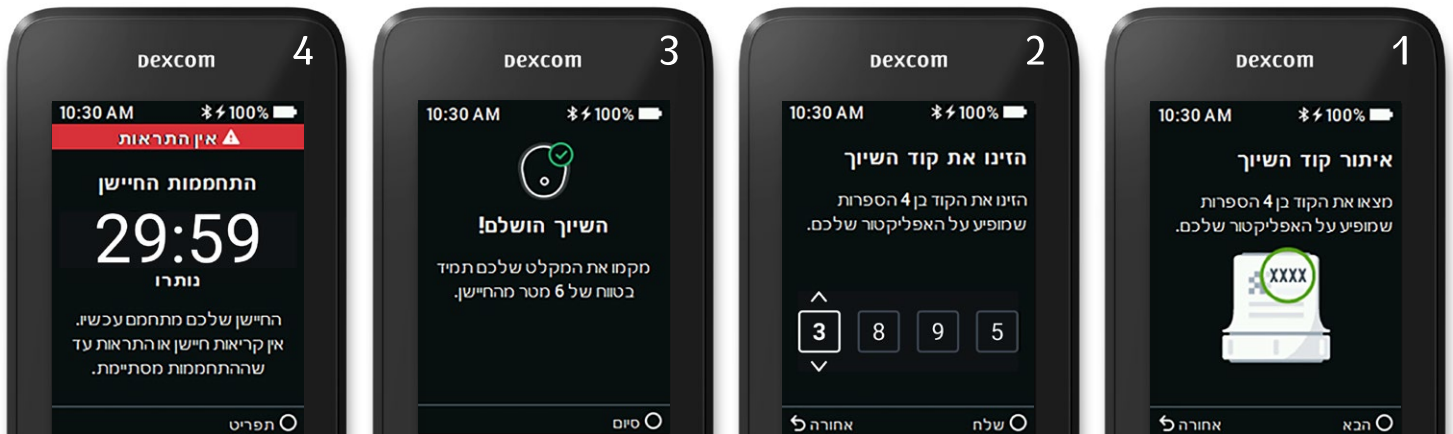

- 1 קוד השיוך נמצא על האפליקטור.
- 2 הכנס את קוד השיוך.
- 3 המתן לשיוך החיישן. שמור את המקלט בטווח של 6 מטר מהחיישן.
- 4 חימום החיישן נמשך 30 דקות.

מסך המגמה והחיצים


מסך המגמה מראה את קריאות הסוכר שלך, גרף המגמה ואת חיצו המגמה. חיצו המגמה מראים באיזה כיוון ובאיזה מהירות משתנה רמת הסוכר שלך.



עולה או יורד שינוי של 30-45 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות	↑ ↓	יציב שינוי של פחות מ-15 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות	→
עולה או יורד במהירות שינוי של יותר מ-45 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות	↑↑ ↓↓	עולה או יורד באיטיות שינוי של 15-30 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות	↗ ↘

יום 10: סיום פעולת החיישן שלך

כל הפעלת חיישן נמשכת עד 10 ימים בתוספת של 12 שעות (Grace Period). תקבל התרעות המודיעות לך כאשר הפעלת החיישן או ה-Grace Period יסתיימו. לאחר סיום הפעלת החיישן, קלף את מדבקת החיישן כמו פלסטר.

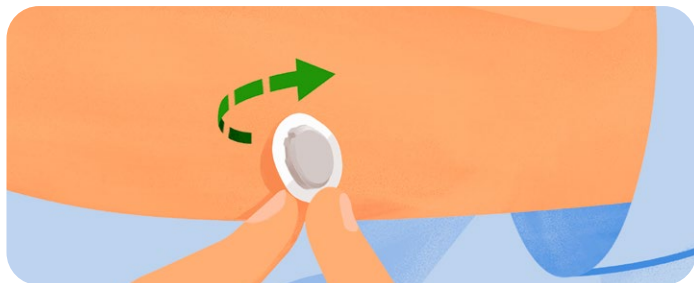

dexcom G7

סנסור רציף למדידת סוכר
בטכנולוגיה מתקדמת

שעות פעילות

08:00-15:30	מוקד שירות לקוחות	ימים א-ה
15:30-22:00	כונן למקרי חירום	ימים א-ה
09:00-22:00	כונן למקרי חירום	סופי שבוע וחגים

שירות לקוחות 03-5773800 | כונן 052-3667020 | פקס 03-5797045
מייל dexcom@padagis.com | אתר dexcomisrael.co.il

מדריך זה מיועד להמחשה בלבד. למידע מלא קרא את האינדיקציות, האזהרות, אמצעי הזהירות וההוראות המסופקים עם מערכת Dexcom G7 CGM שלך.
אם לא תעשה זאת, ייתכן שקריאות החיישן שלך יהיו לא מדויקות, התראות שהוחמצו וייתכן שתפספס אירוע חמור של סוכר נמוך או גבוה.